



## Wrattenverwijderaar

### LEES VOOR GEBRUIK DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING.

#### A. Wat zijn wratten en voetwratten?

Wratten zijn onschuldige verdikkingen van de huid veroorzaakt door het "human papilloma virus" (HPV). Er zijn verschillende soorten wratten, maar de meest voorkomende zijn de gewone wratten. Deze wratten bestaan uit een kern van bindweefsel met bloedvaten, bekleed met laagjes epitheelweefsel.

**Gewone wratten** kunt u herkennen aan het ruwe, 'bloemkoolachtige' oppervlak. Meestal treft u ze aan op handen, knieën en ellebogen.

**Voetwratten** zijn hetzelfde als gewone wratten, alleen zitten zij op de voetzool of de onderkant van de tenen. Voetwratten zijn platter en zijn ook vaak pijnlijker door de druk bij het lopen. Wartner® is ook ontwikkeld voor de behandeling van voetwratten en bevat twee extra stappen voor een optimale voor- en nabehandeling.

Wratten komen het meest voor bij kinderen en tieners. Zij zijn erg besmettelijk en komen vaker voor wanneer het afweersysteem van het lichaam verzwakt is. Wratten kunnen zich verspreiden door direct contact met de wrat, van persoon op persoon of van het ene lichaamsdeel naar het andere. Meer dan 50% van de wratten verdwijnt vanzelf binnen 2 jaar zonder behandeling. Wratten zijn echter ontsierend en zeker voetwratten kunnen pijnlijk zijn. Daarom kiezen veel mensen ervoor om wratten te behandelen in plaats van te wachten tot ze vanzelf verdwijnen.

Traditioneel zijn er 2 manieren om wratten te behandelen. Enerzijds zuurpreparaten die direct op de wrat of voetwrat worden aangebracht en anderzijds verwijdering door een arts die gebruik maakt van lasertherapie, verbranding of cryotherapie (bevriezing met vloeibaar stikstof). Wartner® is een efficiënte en snelle manier, gebaseerd op cryotherapie, om thuis op een gemakkelijke manier wratten te verwijderen. Raadpleeg uw arts als u een wrat/voetwrat groter dan 7,5 mm wilt verwijderen.

#### B. Hoe werkt Wartner®?

Wartner® behandelt wratten en voetwratten met een vergelijkbare bevroeringsmethode die gebruikt wordt door de huisarts:

1. Wartner® befrist de wrat of voetwrat onmiddellijk tot in de kern. Wanneer u het schuimpje op de wrat/voetwrat drukt, kan de huid wit worden. Als gevolg van de bevroering kan er een pijnlijk prikkelend gevoel ontstaan. Wanneer u het schuimpje weghaalt, zal de witte kleur van de huid verdwijnen. Het pijnlijk prikkelende gevoel zal snel verminderen en verdwijnt binnen een paar uur.
2. Na de bevroering kan de huid op de behandelde plek rood worden. Ten gevolge van de bevroering ontstaat er na enkele dagen een blaasje onder de wrat. Dit is niet zichtbaar met het blote oog. De behandelde wrat/voetwrat zal geleidelijk verdwijnen of doorgaans na 10 tot 14 dagen van de huid afvallen. Onder de behandelde wrat heeft zich dan inmiddels weer nieuwe huid gevormd.



#### C. Bijwerkingen:

- Zoals bij alle bevroeringsmethoden kan de huid tijdelijk wit kleuren.
- Het is belangrijk om het product exact te gebruiken zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven staat, omdat een te lange blootstelling aan de bevroering kan leiden tot beschadiging van de lederhuid met littekens en/of zenuwbeschadiging als gevolg.
- Als het gezonde weefsel van vingers/tenen wordt blootgesteld aan het product (wat kan optreden als de applicator langer wordt gebruikt dan de aangegeven tijd) kan dit leiden tot plaatselijk afsterven van de huid.
- In sommige gevallen kan er een grote blaas ontstaan die pijnlijk kan zijn.
- Depigmentatie en/of kleine littekens kunnen ontstaan nadat de wrat van de huid is afgevallen.
- Het gebruik van Wartner® kan resulteren in lichte brandwonden die te wijten zijn aan de lage bevroeringstemperatuur. Hoewel deze bijwerkingen zijn gemeld, gebeurt dit heel uitzonderlijk.
- Het is zeer belangrijk om Wartner® te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing om bijwerkingen te minimaliseren (zie G. Gebruiksaanwijzing).

#### D. Wanneer u Wartner® niet mag gebruiken:

Dit product mag alleen door volwassenen toegepast worden. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. Wartner® mag niet gebruikt worden door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Verder kan Wartner® niet gebruikt worden door diabetici, omdat het bevroren gebied van de huid bij hen niet snel of niet geheel kan

genezen. Mensen met een slechte bloedsomloop wordt aangeraden voor gebruik hun huisarts te raadplegen.

Niet gebruiken op gebieden waar de huid teer, dun of gevoelig is zoals het gezicht, hals, oksels, borsten, billen of genitaliën. Niet gebruiken op een geïrriteerde huid of op plaatsen die geïnfecteerd zijn, roodheid of enig teken van ontsteking zoals jeuk of zwelling vertonen. Niet gebruiken op wratten of voetwratten waar haar uit groeit, moedervlekken, zwarte huidvlekken, pigmentvlekken of ieder ander ongewoon uitzienende huid.

#### E. Let op:

- Bij twijfel of de aandoening een wrat/voetwrat is: raadpleeg uw huisarts.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik; niet inslikken of inademen, alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- Was de handen (behalve de behandelde huid) direct na gebruik.
- Gebruik Wartner® uitsluitend in combinatie met de bijgeleverde schuimpjes.
- Gebruik per wrat één schuimpje; gebruik elk schuimpje slechts één keer.
- Bij wratten op de bovenkant van de hand de vingers langzaam bewegen tijdens de behandeling.
- Vermijd contact met de gezonde huid rond de te behandelen wrat/voetwrat.
- Druk de applicator niet te hard aan wanneer u de wrat of voetwrat behandelt.
- Maak de huid rondom de wrat/voetwrat niet nat met Wartner®.
- Het schuimpje maximaal 20 seconden op een gewone wrat houden en maximaal 40 seconden op een voetwrat houden of minder als de huid rondom de wrat of voetwrat wit wordt.
- Bij meerdere wratten/voetwratten dicht bij elkaar, zeker op hand of vinger, mag u slechts één wrat tegelijk behandelen. De overige wratten afzonderlijk behandelen met een tussenpose van 14 dagen.
- Oude en grote wratten en voetwratten zijn moeilijk te verwijderen. Zij hebben vaak meer dan één behandeling met Wartner® nodig.
- Als er meer dan één behandeling nodig is, mag u de behandeling na 14 dagen herhalen. In totaal de wrat niet meer dan drie keer behandelen. Indien na drie behandelingen nog geen resultaat is bereikt, dient u naar uw huisarts te gaan.
- De houdbaarheidsdatum en het lotnummer staan zowel op de verpakking als onderaan de spuitbus.
- GEVAAR. De inhoud van Wartner® is zeer licht ontvlambaar. Verwijderd houden van warmtebronnen, warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
- De houder niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Gebruik dit product in een goed geventileerde ruimte ten minste 1 meter verwijderd van een ontstekingsbron (vlam, vonk), warmtebron, direct zonlicht en elektrostatische en elektrische bronnen inclusief verlichting. Geen brandende sigaret in de buurt houden.
- Veilig opbergen en bewaren bij kamertemperatuur. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Spuitbus alleen samen met huishoudelijk afval weggevoerd als deze compleet leeg is. Restanten moeten worden weggegooid als klein chemisch afval.
- Vermijd overmatig vijlen van voetwratten omdat dit kan resulteren in lichte kneuzingen of bloedingen.
- Deel de vijl niet met anderen omdat wratten zeer besmettelijk zijn.

#### F. Wartner® verpakking bevat:

- Een spuitbus met een mengsel van dimethylether en propaan, dat niet schadelijk is voor het milieu. CE 0344
- 1 herbruikbare applicatorhouder voor de schuimpjes.
- 12 schuimpjes voor eenmalig gebruik, goed voor 12 behandelingen.
- 1 herbruikbare vijl.
- Deze gebruiksaanwijzing, waarin u alles kunt lezen over wratten en voetwratten, Wartner®, de werking en hoe het succesvol kan worden gebruikt bij de behandeling van wratten en voetwratten.

#### G. Gebruiksaanwijzing:

Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Wartner® gebruikt.

10 tot 14 dagen na de behandeling met Wartner® zullen wratten en voetwratten meestal verdwenen zijn. Oude en grote wratten en voetwratten hebben vaak meer dan één behandeling met Wartner® nodig. Indien na de behandeling de wrat/voetwrat na 14 dagen niet geheel verwijderd is, kunt u Wartner® met een gerust gevoel nog een keer gebruiken. Gebruik ieder schuimpje slechts één keer en gooi het daarna weg. Indien na drie behandelingen nog geen resultaat te zien is, dient u uw huisarts te raadplegen.

Omega Pharma International nv, Venecoweg 26,  
9810 Nazareth, België  
**Distributeur:**  
NL- Omega Pharma Nederland B.V. - Postbus 6612 - 3002 AP  
Rotterdam, Consumentenservice: 010 - 22 11 007  
**Kijk voor meer informatie op [www.wartner.nl](http://www.wartner.nl)**


Laatste herziening: februari 2022

TBC LF13130C **MD** Medisch hulpmiddel **CE** 0344

## MAKKELIJK TE GEBRUIKEN IN 4 STAPPEN VOOR WRATTEN


### STAP 1

Neem het schuimpje aan de blauwe kant tussen duim en wijsvinger en druk erop tot er een kleine opening zichtbaar wordt. Schuif de opening van het schuimpje over het stokje van de applicatorhouder tot het stokje niet meer zichtbaar is.

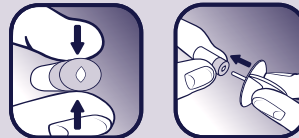

### STAP 2

Plaats de spuitbus rechtop en houdt deze uit de buurt van uw lichaam, ontstekingsbronnen, warmtebronnen, direct zonlicht en elektrische bronnen. Plaats de houder met het schuimpje in de opening van de spuitbus zodanig dat het schuimpje niet meer zichtbaar is. Houd de spuitbus met één hand aan de onderzijde vast en druk met de andere hand het ventiel gedurende **drie seconden** stevig in (tel van 21 t/m 23). U hoort een sissend geluid. Haal de houder met het schuimpje uit het ventiel. Het schuimpje is doordrenkt met koude vloeistof en er ontstaat condens. Deze condens is onschadelijk.

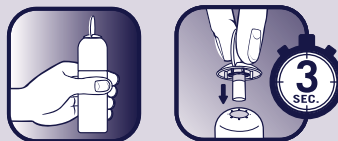


### STAP 3



### STAP 4

Nadat u 20 seconden heeft gewacht, plaatst u het uiteinde van het schuimpje met een lichte druk op de wrat.

- Voor gewone wratten: gebruik het schuimpje 20 seconden
- Voor voetwratten: gebruik het schuimpje 40 seconden

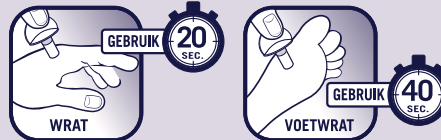

Zorg ervoor dat er constant contact is met de te behandelen plek. Het schuimpje moet gebruikt worden volgens de aangegeven behandelingsduur. Er zal een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan als gevolg van de bevroering. Wacht na het behandelen van de wrat 2 minuten voordat u met een doekje het schuimpje van de houder verwijderd. Het schuimpje na 1 keer weggevoerd. Hergebruik het schuimpje niet en raak het uiteinde van het schuimpje niet met blote handen aan om er zeker van te zijn dat u de huid niet infecteert met het wratvirus.

## TWEE EXTRA STAPPEN VOOR VOETWRATTEN VOOR EEN OPTIMALE VOOR- EN NABEHANDELING

### VOOR DE BEHANDELING

Dompel uw voet met de voetwrat gedurende 5 minuten onder in warm water en gebruik daarna het vijltje om eelt op de wrat te verwijderen.



### STAP 1-4

Zie boven. Hetzelfde als voor de verwijdering van gewone wratten.

### STAP 5

Na applicatie gedurende 40 seconden kunt u pijn ervaren door lichte druk of wrijving op de behandelde zone. Om dit te verminderen kunt u gebruik maken van comfortpleisters die vrij te koop zijn. Deze verpakking bevat geen comfortpleisters.



### H. Nabehandeling:

- Houd de behandelde plek schoon.
- Zwemmen en douchen toegestaan.
- Niet peuteren of krabben aan de behandelde plek.
- Eventuele blaren indien nodig beschermen met een pleister, niet doorprikken.
- Raadpleeg een arts indien het pijnlijk, prikkelend gevoel niet verdwijnt of een andere complicatie optreedt.